

PRODUKTÜBERSICHT

August 2025

LEGENDE

Wundart



oberflächliche Wunde



tiefe Wunde

Wundstadium



nekrotische Wunde



fibrinös / belegte Wunde



granulierende Wunde



epithelisierende Wunde

Exsudationsmenge



schwache Exsudation



mäßige Exsudation



starke Exsudation

Produkttyp

PV

Primärverband

SV

Sekundärverband

WF

Wundfüller

Vertrieb durch:
Management AG für
Integrierte Versorgung
Aidenbachstraße 52a
81379 München
Tel: 089-75075592
Fax: 089-75505689
www.miv-ag.de
info@miv-ag.de

Alle Rechte vorbehalten. Keine Vervielfältigung und Nutzung von Print- oder Bildmaterial ohne Genehmigung der TRIGOCare International GmbH. TRIGOCare International GmbH übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen die TRIGOCare International GmbH, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen.

Ausgabestand: 08/2025

©TRIGOCare International GmbH 2009-2025

In den Wiesen 3
51674 Wiehl - Germany
www.trigocare.com

INHALTSVERZEICHNIS:

Übersicht Wundversorgung	4
TRIGOpad aqua / TRIGOpad aqua comfort	5
TRIGO Hydrofaser	6
TRIGO Superabsorber	7
TRIGOtüll komb / TRIGOtüll komb adhesive	8
TRIGOcolloid foam	9
TRIGOcolloid thin / TRIGOcolloid comfort	10
TRIGOfilm	11
Gezielt aktiv werden	12
 Übersicht Binden	 13
Kohäsive Binden	14
Klebebinden	15
Zinkleimbinden	16
Elastische Fixierbinden	17
Langzugbinde / Kurzzugbinde	18
Schlauchbandagen	19

Der Patient an erster Stelle bedeutet für uns, auf den Patienten optimierte Wundbehandlungen mit einem sorgfältig entwickelten Produktsortiment anzubieten. Wir beachten die Bedürfnisse der Patienten und alle begleitenden Umstände, mit dem Ziel effiziente und erfolgreiche Therapien zu gewährleisten. Effektive Produkte, die ein ideal-feuchtes Wundmilieu fördern, sind entscheidend diese Zielsetzung zu erreichen.

Diese multidisziplinäre Aufgabe ist nicht nur eine medizinische und pflegerische Herausforderung, sondern auch der Anspruch die Kosteneffizienz zu verbessern. Effektive Produkte auszuwählen, hilft Behandlungszeiten zu verkürzen, Kosten zu senken und trägt damit auch zu einer höheren Lebensqualität für Patienten und deren Familien bei.

TRIGOCare International GmbH wurde 2010 von der miro Verbandstoffe GmbH gegründet und hat im Bereich der Modernen Wundversorgung eine herausragende Produktauswahl für Prävention, Behandlung und Heilung etabliert. Auf Diabetes und chronische Wunden fokussiert, entwickeln wir effektive und hochwertige Lösungen für unsere Patienten weltweit. Ein Team aus internationalen Experten stellt die Basis für zukünftige Forschungs- und Entwicklungsarbeiten ebenso wie für die Weiterentwicklung und Verbesserung bestehender Produkte.

Qualitativ hochwertige Wundversorgung, hohe Standards
und Kundenorientierung sind unsere Berufung.

Moderne Wundversorgung auf einen Blick!



Art-N°	Bezeichnung	VE	PZN
Transparente Hydrogelaufgabe			
11010	TRIGOpad aqua 10cm x 10cm	10 Stück	09945423
11020	TRIGOpad aqua 10cm x 10cm	20 Stück	09945446
11050	TRIGOpad aqua 10cm x 10cm	50 Stück	04714423
11030	TRIGOpad aqua comfort 68mm x 43mm	50 Stück	17864207
Gelbildender Faserverband			
14510	TRIGO Hydrofaser 10cm x 10cm	10 Stück	19670401
14520	TRIGO Hydrofaser 10cm x 20cm	10 Stück	19670418
Super absorbierender Wundverband			
12050	TRIGO Superabsorber 10cm x 10cm	25 Stück	18713195
12051	TRIGO Superabsorber 10cm x 20cm	25 Stück	18713203
12052	TRIGO Superabsorber 20cm x 30cm	25 Stück	18713226
Saugfähiger Lipocolloid Verband			
13010	TRIGOtüll komb 10cm x 10cm	10 Stück	13417204
13050	TRIGOtüll komb 10cm x 10cm	50 Stück	13417210
13011	TRIGOtüll komb 10cm x 20cm	10 Stück	20043649
13051	TRIGOtüll komb 10cm x 20cm	50 Stück	20043661

Art-N°	Bezeichnung	VE	PZN
Saugfähiger Lipocolloid Verband mit Kleberand			
13101	TRIGOtüll komb adhesive 6cm x 7cm	10 Stück	20043632
13105	TRIGOtüll komb adhesive 6cm x 7cm	50 Stück	20043655
13108	TRIGOtüll komb adhesive 10cm x 10cm	10 Stück	19681014
13109	TRIGOtüll komb adhesive 10cm x 10cm	50 Stück	15250079
13110	TRIGOtüll komb adhesive 15cm x 15cm	10 Stück	14135519
13150	TRIGOtüll komb adhesive 15cm x 15cm	50 Stück	14262318
Selbstklebender Hydrokolloid-Schaumverband			
14102	TRIGOcolloid foam 10cm x 10cm	10 Stück	09944903
Hydrocolloide Wundauflage			
15002	TRIGOcolloid thin 10cm x 10cm	10 Stück	09944926
15052	TRIGOcolloid thin 10cm x 10cm	50 Stück	10383232
15005	TRIGOcolloid comfort 68mm x 43mm	50 Stück	17864236
Steriler, transparenter Wundschnellverband von der Rolle			
16020	TRIGOfilm Rolle 10m x 5cm	1 Stück	09945073
16021	TRIGOfilm Rolle 10m x 10cm	1 Stück	09945050
16022	TRIGOfilm Rolle 10m x 15cm	1 Stück	09945067



TRIGOpad aqua / TRIGOpad aqua comfort

Transparente Hydrogelaufgabe

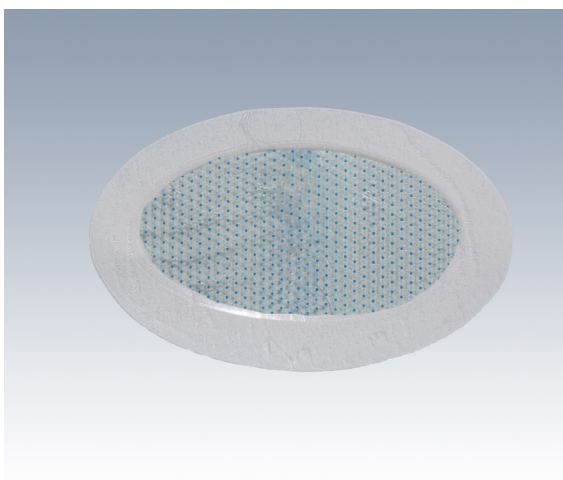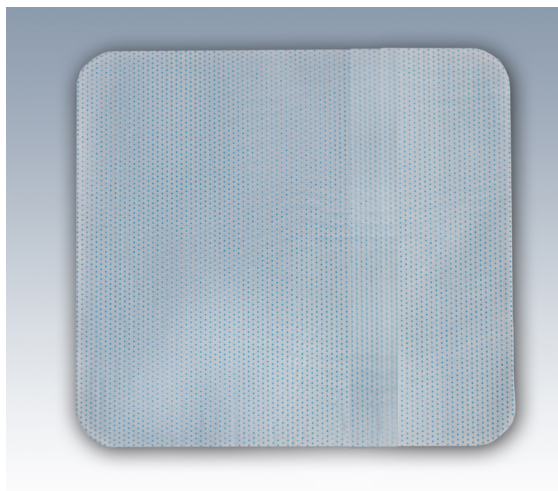

TRIGOpad aqua ist ein transparenter Hydrogelverband aus einem PU-Gel (60% Wasseranteil) mit einer gasdurchlässigen, aber flüssigkeits- und keimdichten Deckschicht aus Polyurethan. Das Gel kann sowohl Feuchtigkeit abgeben als auch Sekret aufnehmen. Hierdurch entsteht ein feuchtes Wundmilieu, das den natürlichen Wundheilungsprozess fördert.

TRIGOpad aqua verklebt nicht mit der Wunde und lässt sich rückstandsfrei entfernen. Der Wundverband ist transparent und ermöglicht somit die Beobachtung der Wunde ohne Verbandwechsel.

TRIGOpad aqua comfort hat einen selbstklebenden Rand, TRIGOpad aqua muss mit einem Sekundärverband fixiert werden.

Vorteile von TRIGOpad aqua Produkten:

- gibt Feuchtigkeit an die Wunde ab, bei gleichzeitiger Aufnahme von Exsudat
- geeignet für Wunddebridement
- verklebt nicht mit der Wunde
- ideal-feuchtes Wundmilieu
- bakterien- und feuchtigkeitsabweisend, aber durchlässig für Gase

Anwendungsgebiete:

- oberflächliche Wunden in der Granulations- oder Epithelisierungsphase
- Wunden mit wenig oder keiner Exsudation
- geeignet für Debridement

Kontraindikationen:

- Verbrennungen 3. Grades
- stark exsudierende Wunden
- infizierte Wunden


Bestellinfos TRIGOpad aqua

Art-N°	Größe	VE	PZN
11010	10 x 10cm	10 St.	09945423
11020	10 x 10cm	20 St.	09945446
11050	10 x 10cm	50 St.	04714423

Bestellinfos TRIGOpad aqua comfort

Art-N°	Größe	VE	PZN
11030	68 x 43mm	50 St.	17864207

Anwendungshinweise

Wundart	Wundstadium	Exsudation	Produkttyp
			PV

TRIGO Hydrofaser

Gelbildender Faserverband



Die TRIGO Hydrofaser ist eine weiche, anpassungsfähige Wundauflage, die Wundflüssigkeit aufnimmt und ein weiches Gel bildet. Hierdurch wird ein feuchtes Wundmilieu aufrechterhalten und der natürliche Heilungsprozess gefördert. Weiterhin wird das Entfernen von unnötigem Material aus der Wunde (autolytisches Debridement) unterstützt, ohne neu gebildetes Gewebe zu beschädigen. Dieser Primärverband sollte mit einem sekundären Deckverband verwendet werden.

Anwendungsgebiete:

Mäßig bis stark exsudierende Wunden, wie z.B.:

- Unterschenkelgeschwüre, Druckgeschwüre (Stadium II-IV) und diabetische Geschwüre
- Chirurgische Wunden (postoperativ, Hautentnahmestellen, sekundär heilende Wunden, dermatologische Wunden)
- Partielle Verbrennungen
- Traumatische Wunden (Abschürfungen und Schnittwunden)
- Onkologische Wunden (bei mäßiger oder starker Exsudation, oberflächlich oder tief)

Vorteile von TRIGO Hydrofaser:

- Hohe Aufnahmekapazität und sicherer Einschluss des Wundexsudats
- Autolytisches Debridement verbessert den Patientenkomfort
- Minimiert das Risiko von Mazeration
- Schafft ein feuchtes Wundmilieu




Kontraindikationen:

- Patienten mit einer Allergie gegen Natriumcarboxymethylcellulose (CMC) sollten dieses Produkt nicht verwenden.

Bestellinfos



Art-N°	Größe	VE	PZN
14510	10 x 10 cm	10 St.	19670401
14520	10 x 20 cm	10 St.	19670418

Anwendungshinweise

Wundart	Wundstadium	Exsudation	Produkttyp
			PV

TRIGO Superabsorber

Superabsorbierender Wundverband

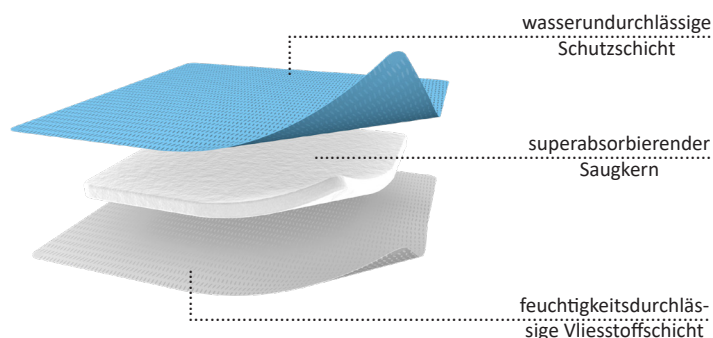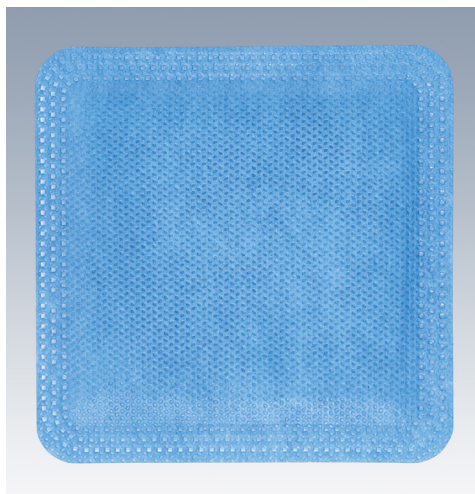

Anwendungsgebiete:

- mäßig bis stark exsudierende Wunden
- Beingeschwüre
- Druckgeschwüre
- Diabetische Fußgeschwüre
- Dehisierte chirurgische Wunden

Kontraindikationen:

- Nicht anwenden bei Patienten mit bekannter Allergie oder Überempfindlichkeit gegen das Produkt oder einen seiner Bestandteile
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf trockenen oder wenig exsudierenden Wunden, Schleimhäuten oder Augen
- nicht in Wundhöhlen verwenden, da der Verband während der Absorption anschwillt
- Nicht bei Verbrennungen dritten Grades verwenden

TRIGO Superabsorber ist eine dreilagige, sterile Wundauflage, die aus einer luftdurchlässigen, wasserdichten Vliesstoffschicht, einem superabsorbierenden Saugkern und einer hydrodurchlässigen Vliesstoffschicht besteht. Die Wundauflage hält die Wundumgebung feucht, was wiederum den natürlichen Wundheilungsprozess fördert. Wundexsudat wird von der Wunde weggeleitet und sicher in der absorbierenden Schicht gehalten. Das Risiko einer Mazeration und Schädigung der Haut in der Wundumgebung wird minimiert. Der Verband muss mit einem Sekundärverband fixiert werden.

Vorteile von TRIGO Superabsorber:

- hohe Aufnahmekapazität und sicherer Einschluss des Wundexsudats
- minimiert das Risiko von Mazeration
- äußere Schicht ist undurchlässig für Bakterien oder Feuchtigkeit
- schafft ein feuchtes Wundmilieu

Bestellinfos



Art-N°	Größe	VE	PZN
12050	10 x 10cm	25 St.	18713195
12051	20 x 10cm	25 St.	18713203
12052	30 x 20cm	25 St.	18713226

Anwendungshinweise

Wundart	Wundstadium	Exsudation	Produkttyp
			PV, SV

TRIGOtüll komb / TRIGOtüll komb adhesive

Saugfähiger Lipocolloid Verband

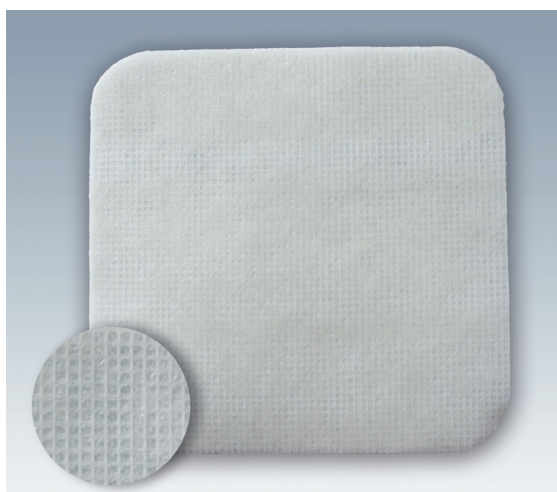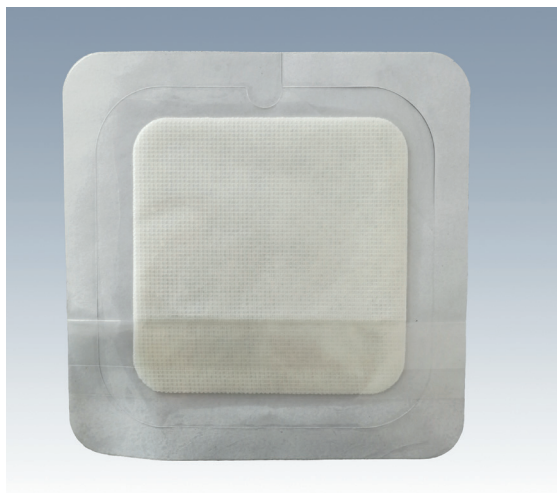

Anwendungsgebiete:






TRIGOtüll komb Produkte sind geeignet für schwach bis mäßig exsudierende Wunden, z.B.:

- Verbrennungen
- Traumatische Wunden
- Schürfwunden
- Post-operative Wunden
- Beingeschwüre
- Druckgeschwüre
- Diabetische Fußgeschwüre
- Epidermolysis bullosa

Kontraindikationen:

- Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen oder mehrere Inhaltsstoffe

Anwendungshinweise

Wundart	Wundstadium	Exsudation	Produkttyp
 	  	 + 	PV

Die TRIGOtüll komb Produkte bestehen aus einem saugfähigen Polyestergewebe, welches mit einer nicht haftenden Lipokolloid-Wundkontaktschicht beschichtet ist. Das enthaltene Hydrokolloid sorgt dafür, dass bei Kontakt mit Feuchtigkeit ein weiches Gel entsteht, welches die Wundumgebung feucht hält, die Wundheilung fördert und ein Verkleben mit der Wundauflage verhindert. Das mit superabsorbierendem Pulver versehene Polyestergewebe nimmt überschüssiges Exsudat schnell und sicher auf, wodurch die Mazerationsgefahr deutlich minimiert wird. Die TRIGOtüll komb Produkte machen das Exsudatmanagement einfach und anwenderfreundlich bei gleichzeitigem hohem Patientenkomfort.

TRIGOtüll komb adhesive hat einen selbstklebenden, transparenten Rand, wohingegen TRIGOtüll komb mit einem adäquaten Sekundärverband fixiert werden muss.

Vorteile von TRIGOtüll komb Produkten:

- Kombiniert die positiven Charakteristiken eines Hydrokolloids mit den Vorteilen einer absorbierenden Wundauflage
- Schafft ideal feuchte Wundverhältnisse
- Atraumatische Verbandwechsel
- Verklebt nicht mit der Wunde

Bestellinfos TRIGOtüll komb


Art-N°	Größe	VE	PZN
13010	10 x 10cm	10 St.	13417204
13050	10 x 10cm	50 St.	13417210
13011	10 x 20cm	10 St.	20043649
13051	10 x 20cm	50 St.	20043661

Bestellinfos TRIGOtüll komb adh.

Art-N°	Größe	Kompresse	VE	PZN
13101	6 x 7cm	3 x 3,3cm	10 St.	20043632
13105	6 x 7cm	3 x 3,3cm	50 St.	20043655
13108	10 x 10cm	7 x 7cm	10 St.	19681014
13109	10 x 10cm	7 x 7cm	50 St.	15250079
13110	15 x 15cm	10 x 10cm	10 St.	14135519
13150	15 x 15cm	10 x 10cm	50 St.	14262318

TRIGOcolloid foam

Selbstklebender Hydrocolloid-Schaumverband

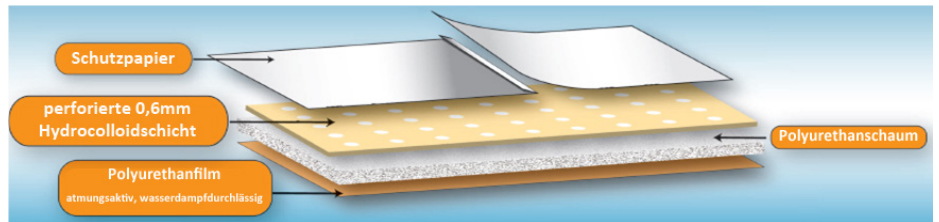

TRIGOcolloid foam ist ein selbstklebender Hydrocolloidverband mit einer Schicht aus PU-Schaum. Die darunterliegende Hydrocolloidschicht ist perforiert, dies ermöglicht dem PU-Schaum eine schnelle Aufnahme des überflüssigen Exsudats, wodurch Mazerationen weitestgehend vorgebeugt werden können.

TRIGOcolloid foam erleichtert das Exsudatmanagement und macht es anwenderfreundlich bei gleichzeitig hohem Patientenkomfort.

Die Hydrocolloid-Matrix verwandelt sich bei Kontakt mit Wundexsudat in ein weiches Gel, welches gerade bei wenig nässenden Wunden ein ideal-feuchtes Wundmilieu aufrecht erhalten kann und somit eine schnellere Wundheilung unterstützt.

Anwendungsgebiete:

- leicht bis mäßig exsudierende Wunden
- Dekubitus
- Ulcus Cruris verschiedenen Ursprungs
- Diabetische Fußsyndrom
- postoperative Wunden
- Spalthautentnahmestellen
- Hautabschürfungen
- Verbrennungen bis 2. Grades

Kontraindikationen:

- im Bereich freiliegender Muskeln, Knochen und Sehnen
- Verbrennungen 3. Grades
- infizierte Wunden
- trockene Wunden




Vorteile von TRIGOcolloid foam:

- kombiniert die positiven Eigenschaften einer Hydrocolloidaufgabe mit den Produktvorteilen eines Schaumverbandes
- gutes Absorptionsvermögen
- verklebt nicht mit der Wunde
- atraumatischer Verbandwechsel
- ideal-feuchtes Wundmilieu
- bakterien- und feuchtigkeitsabweisend, aber durchlässig für Gase
- geringe Mazerationsgefahr durch ein hervorragendes Exsudatmanagement

Bestellinfos



Art-N°	Größe	VE	PZN
14102	10 x 10cm	10 St.	09944903

Anwendungshinweise

Wundart	Wundstadium	Exsudation	Produkttyp
			PV, SV

TRIGOcolloid thin / TRIGOcolloid comfort

hydrokolloide Wundauflage

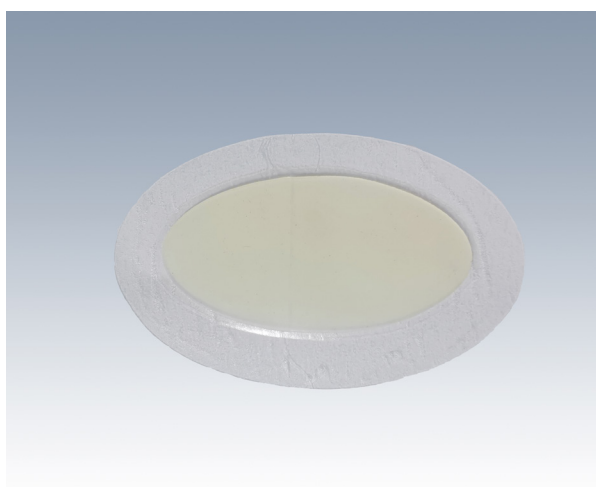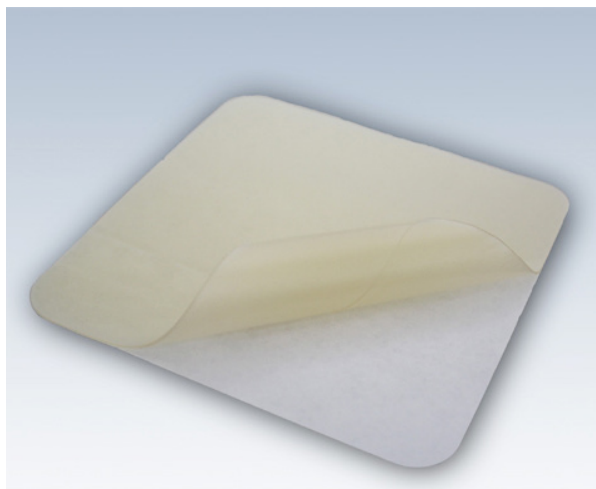

Die TRIGOcolloid Produkte sind hydroaktive, sterile, selbstklebende Wundauflagen zur feuchten Wundbehandlung. Die Wundauflagen erhalten ein ideal-feuchtes Wundmilieu, das die physiologischen Heilungsprozesse fördert. Sie sind durchlässig für Gase jedoch nicht für Flüssigkeiten und Bakterien. Durch die Gelbildung bei Kontakt mit Wundexsudat ermöglichen beide Wundauflagen einen atraumatischen Verbandwechsel.

TRIGOcolloid thin ist sehr gut modellierbar und durch die hohe Flexibilität gerade im Gelenkbereich und an exponierten Stellen besonders gut anwendbar. Durch die geringe Stärke (ca. 0,6mm) ist zudem eine gute Beobachtung der Wunde möglich.

Bestellinfos TRIGOcolloid thin

Art-N°	Größe	VE	PZN
15002	10 x 10cm	10 St.	09944926
15052	10 x 10cm	50 St.	10383232

Bestellinfos TRIGOcolloid comfort

Art-N°	Größe	VE	PZN
15005	68 x 43mm	50 St.	17864236

Anwendungsgebiete:

- mehr oder weniger tiefe Hautgeschwüre
- Druck-, Bein- oder diabetische Geschwüre
- Hautentnahmestellen / -transplantationen
- postoperative Verbände zum Schutz der Naht
- Schutz von empfindlicher Haut
- Hautabschürfungen, oberflächliche Wunden
- Verbrennungen bis 2. Grades
- Stomawunden (als Hautschutz)
- Windelausschlag bei Säuglingen


Kontraindikationen:

- Nicht anzuwenden bei Patienten mit bekannter Empfindlichkeit gegen das Produkt oder einen seiner Bestandteile, insbesondere Polyisobutene und Carboxymethylcellulose.

Vorteile von TRIGOcolloid Produkten:

- verkleben nicht mit der Wunde
- ideal-feuchtes Wundmilieu
- bakterien- und feuchtigkeitsabweisend, aber durchlässig für Gase
- selbstklebend
- leicht transparent (erleichtert die Wundbeobachtung)

Anwendungshinweise

Wundart	Wundstadium	Exsudation	Produkttyp
			PV

TRIGOfilm Rolle

transparenter Wundschnellverband



TRIGOfilm ist ein wasserdichter Wundverband mit einer Beschichtung aus hautfreundlichem Acrylatkleber. Der Wundverband ist transparent und ermöglicht somit die Beobachtung der Wunde ohne Verbandwechsel. TRIGOfilm ist durchlässig für Gase, aber nicht für Flüssigkeiten und Bakterien. Eine Rastereinteilung erleichtert den individuellen Zuschnitt.




Anwendungsgebiete:

- Fixierung von Kathetern und Kanülen
- Fixierung von primären Wundauflagen (z.B. TRIGOpad aqua, TRIGO Hydrofaser)

Bestellinfos

Art-N°	Größe	VE	PZN
16020	10m x 5cm	1 St.	09945073
16021	10m x 10cm	1 St.	09945050
16022	10m x 15cm	1 St.	09945067

Anwendungshinweise

Wundart	Wundstadium	Exsudation	Produkttyp
			PV, SV

Gezielt aktiv werden



Produkte	TRIGOPad aqua	TRIGOHydrofaser	TRIGOSuperabsorber	TRIGOtüll komb/ TRIGOtüll komb adhesive	TRIGOcolloid foam	TRIGOcolloid thin	TRIGOfilm Rolle
 Wundstadium nekrotische Wunde fibrinöse Wunde granulierende Wunde epithelisierende Wunde	 Wundtiefe = tief = oberflächlich	 Exsudationsgrad schwach mittel stark	 Sekundärverband erforderlich	Möglichkeiten der Kombination	Primär-/ Sekundärverband		
	 TRIGOfilm PV	 TRIGOfilm PV	 TRIGOfilm PV, SV	 TRIGOfilm PV	 TRIGOfilm PV, SV	 TRIGOfilm PV	 TRIGOPad aqua TRIGOtüll komb TRIGOHydrofaser TRIGO Superab- sorber PV, SV

Alle Binden auf einen Blick!

Art-N°	Bezeichnung	VE	PZN
Kohäsive Universal-Kompressionsbinde			
52702	TRIGO RS-TK blau 2,5m x 5cm	10 Stück	17514737
52705	TRIGO RS-TK blau 4,5m x 5cm	10 Stück	11192362
52708	TRIGO RS-TK blau 4,5m x 7,5cm	10 Stück	10818339
52710	TRIGO RS-TK blau 4,5m x 10cm	10 Stück	10818351
52008	TRIGO RS-TK rot 4,5m x 7,5cm	10 Stück	10818233
52010	TRIGO RS-TK rot 4,5m x 10cm	10 Stück	10818285
Kohäsive, elastische Fixierbinde mit feiner Struktur			
60001	TRIGOmull haft fein weiß 20m x 6cm	6 Stück	00049472
60002	TRIGOmull haft fein weiß 20m x 8cm	6 Stück	00049489
60003	TRIGOmull haft fein weiß 20m x 10cm	6 Stück	00049584
60004	TRIGOmull haft fein blau 20m x 6cm	6 Stück	00049590
60005	TRIGOmull haft fein blau 20m x 8cm	6 Stück	00049609
60006	TRIGOmull haft fein blau 20m x 10cm	6 Stück	00049621
60007	TRIGOmull haft fein rot 20m x 6cm	6 Stück	00050009
60008	TRIGOmull haft fein rot 20m x 8cm	6 Stück	00050185
60009	TRIGOmull haft fein rot 20m x 10cm	6 Stück	00051173
Quer- und längselastische Klebebinde			
54106	TRIGO RS-TP 2,5m x 6cm	10 Stück	09944808
54108	TRIGO RS-TP 2,5m x 8cm	10 Stück	09944814
54110	TRIGO RS-TP 2,5m x 10cm	10 Stück	09944783
Längselastische Klebebinde			
55606	TRIGO RS-TM blau 2,5m x 6cm	10 Stück	13153395
55608	TRIGO RS-TM blau 2,5m x 8cm	10 Stück	13153426
55610	TRIGO RS-TM blau 2,5m x 10cm	10 Stück	13153432
55506	TRIGO RS-TM rot 2,5m x 6cm	10 Stück	13153343
55508	TRIGO RS-TM rot 2,5m x 8cm	10 Stück	13153372
55510	TRIGO RS-TM rot 2,5m x 10cm	10 Stück	13153389
55406	TRIGO RS-TM weiß 2,5m x 6cm	10 Stück	13153314
55408	TRIGO RS-TM weiß 2,5m x 8cm	10 Stück	13153320
55410	TRIGO RS-TM weiß 2,5m x 10cm	10 Stück	13153337

Art-N°	Bezeichnung	VE	PZN
Elastische Zinkleim-Kühlbinde			
45056	TRIGOzink cool 5m x 6cm	10 Stück	11104524
45058	TRIGOzink cool 5m x 8cm	10 Stück	11104530
45051	TRIGOzink cool 5m x 10cm	10 Stück	11104547
Elastische Zinkleimbinde			
10805	TRIGOzink 5m x 10cm	10 Stück	09945535
10807	TRIGOzink 7m x 10cm	10 Stück	09945541
10810	TRIGOzink 10m x 10cm	10 Stück	09945529
Elastische Idealbinde			
10406	TRIGOideal weiß 5m x 6cm	10 Stück	09945280
10408	TRIGOideal weiß 5m x 8cm	10 Stück	09945297
10410	TRIGOideal weiß 5m x 10cm	10 Stück	09945245
Elastische Mullfixierbinde			
61602	TRIGOmull fein 4m x 8cm	20 Stück	09945400
61603	TRIGOmull fein 4m x 10cm	20 Stück	09945392
Langzugbinde zur Kompression			
22006	TRIGOlant 7m x 6cm	10 Stück	09945334
22008	TRIGOlant 7m x 8cm	10 Stück	09945340
22010	TRIGOlant 7m x 10cm	10 Stück	09945311
22012	TRIGOlant 7m x 12cm	10 Stück	09945328
Kurzzugbinde zur Kompression			
21006	TRIGOband 5m x 6cm	10 Stück	09944889
21008	TRIGOband 5m x 8cm	10 Stück	09944895
21010	TRIGOband 5m x 10cm	10 Stück	09944866
21012	TRIGOband 5m x 12cm	10 Stück	09944872
Schlauchbandage mit leichter Kompression			
91005	TRIGOlant Gr. E 10m x 8,75cm	1 Rolle	09945386
91006	TRIGOlant Gr. F 10m x 10cm	1 Rolle	09945357
91007	TRIGOlant Gr. G 10m x 12cm	1 Rolle	09945363
Dauerelastischer Schlauchverband			
92003	TRIGOtubiquick 10m x 8cm	1 Stück	18001916
92004	TRIGOtubiquick 10m x 10,75cm	1 Stück	18001922

TRIGO RS-TK

Kohäsive Universal-Kompressionsbinde

LATEXFREI

Zur Fixierung von Verbänden, Polstermaterial, Kompressen, IV-Zugängen oder medizinischen Hilfsmitteln und für leichte Stütz- und Entlastungsverbände, kohäsiv, zur Anwendung auf intakter Haut



TRIGO RS-TK ist eine kohäsive, elastische Fixierbinde mit universellem Einsatzbereich. Sie lässt sich faltenfrei anlegen und sorgt für eine kontrollierte Kompression. Die Binde ist wirtschaftlich, da nur wenige Bindetouren benötigt werden. TRIGO RS-TK lässt sich einfach und gerade reißen, so dass keine Schere benötigt wird. Die Binde haftet auf sich selbst aber nicht auf Haut und Haaren, hat eine sehr gute Luftdurchlässigkeit, ist wasserabweisend, leicht und komfortabel. Einzeln cellophaniert.

Bestellinfos

Länge: ca. 4,5m gedehnt, 10 Stück je Packung

Art-N°	Farbe	Breite	PZN
52702	blau	2,5cm	17514737
52705	blau	5cm	11192362
52708	blau	7,5cm	10818339
52710	blau	10cm	10818351
52008	rot	7,5cm	10818233
52010	rot	10cm	10818285

TRIGOmull haft

Kohäsive, elastische Fixierbinde, feine Struktur

Zur Fixierung von Verbänden, Polstermaterial, Kompressen, IV-Zugängen oder medizinischen Hilfsmitteln und für leichte Stütz- und Entlastungsverbände, kohäsiv, zur Anwendung auf intakter Haut



TRIGOmull haft ist eine kohäsive, elastische Fixierbinde mit universellem Einsatzbereich. Sie lässt sich faltenfrei anlegen (gut modellierbar) ohne abzuschnüren und ist dabei wirtschaftlich, da nur sehr wenig Bindetouren benötigt werden. Die Binde haftet auf sich selbst aber nicht auf der Haut bzw. Haaren. Verbandklammern werden nicht benötigt. Erhältlich in den Farben: weiß, blau und rot.

Bestellinfos

Länge: ca. 20m gedehnt, 6 Stück je Packung

Art-N°	Farbe	Breite	PZN
60001	weiß	6cm	00049472
60002	weiß	8cm	00049489
60003	weiß	10cm	00049584
60004	blau	6cm	00049590
60005	blau	8cm	00049609
60006	blau	10cm	00049621
60007	rot	6cm	00050009
60008	rot	8cm	00050185
60009	rot	10cm	00051173

TRIGO RS-TP

Quer- und längselastische Klebebinde

Kompressionsbinde zur Anwendung auf intakter Haut, adhesiv



TRIGO RS-TP ist eine längs- und querelastische, hautfarbene Klebebinde mit einem latexfreien, hypoallergenem Haftauftrag. Die Dehnung beträgt in Längsrichtung ca. 60% und in Querrichtung ca. 30%. TRIGO RS-TP lässt sich leicht abrollen und gibt sicheren Halt ohne zu verrutschen.

Bestellinfos

Länge: ca. 2,5m ungedehnt, 10 Stück je Packung

Art-N°	Breite	PZN
54106	6cm	09944808
54108	8cm	09944814
54110	10cm	09944783

TRIGO RS-TM

Längselastische Klebebinde

Kompressionsbinde zur Anwendung auf intakter Haut, adhesiv



TRIGO RS-TM ist eine leichte längselastische Klebebinde mit einem latexfreien, hypoallergenem Haftauftrag. Die Dehnung beträgt ca. 80%. TRIGO RS-TM lässt sich leicht abrollen und gibt sicheren Halt ohne zu verrutschen. Erhältlich in drei Farben.

Bestellinfos

Länge: ca. 2,5m ungedehnt, 10 Stück je Packung

Art-N°	Farbe	Breite	PZN
55606	blau	6cm	13153395
55608	blau	8cm	13153426
55610	blau	10cm	13153432
55506	rot	6cm	13153343
55508	rot	8cm	13153372
55510	rot	10cm	13153389
55406	weiß	6cm	13153314
55408	weiß	8cm	13153320
55410	weiß	10cm	13153337

TRIGOzink cool

Elastische Zinkleim-Kühlbinde

Kompressionsbinde zur Anwendung auf intakter Haut auf Zinkleim-Basis



TRIGOzink cool kombiniert durch ihre verbesserte Rezeptur die sehr guten Eigenschaften einer Zinkleimbinde und einer Kühlbinde. TRIGOzink cool ist universell einsetzbar für die schnelle und effektive Erste Hilfe und optimal geeignet für den niedergelassenen Bereich wie Traumatologie/Orthopädie, Phlebologie, Veterinärmedizin, Hausärzte, Dermatologen, Sportmediziner. Einzeln versiegelt.

Bestellinfos

Länge: ca. 5m gedehnt, 10 Stück je Packung

Art-N°	Breite	PZN
45056	6cm	11104524
45058	8cm	11104530
45051	10cm	11104547



TRIGOzink

Elastische Zinkleimbinde

Kompressionsbinde zur Anwendung auf intakter Haut auf Zinkleim-Basis



TRIGOzink ist gebrauchsfertig zur zeitsparenden Anwendung. Sie ermöglicht ein einfaches und faltenfreies Anmodellieren des Verbandes. Einzeln versiegelt.

Bestellinfos

Breite: ca. 10cm ungedehnt, 10 Stück je Packung

Art-N°	Länge	PZN
10805	ca. 5m	09945535
10807	ca. 7m	09945541
10810	ca. 10m	09945529



TRIGOideal

Elastische Idealbinde

Dauerelastische Idealbinde zum Fixieren, Stützen und Entlasten zur Anwendung auf intakter Haut



TRIGOideal ist eine dauerelastische und strapazierfähige Idealbinde mit einem großen Anwendungsbereich. TRIGOideal schmiegt sich gut an und garantiert einen festen und dauerhaften Sitz. Trotz des dichten Gewebes ist diese Binde luftdurchlässig und dank des hohen Baumwollanteils sehr hautverträglich.

Bestellinfos

Länge: ca. 5m gedehnt, 10 Stück je Packung

Art-N°	Farbe	Breite	PZN
10406	weiß	6cm	09945280
10408	weiß	8cm	09945297
10410	weiß	10cm	09945245

TRIGOmull fein

Elastische Mullfixierbinde

Zur Fixierung von Verbänden, Polstermaterial, Kompressen, IV-Zugängen oder medizinischen Hilfsmitteln und für leichte Stütz- und Entlastungsverbände zur Anwendung auf intakter Haut



TRIGOmull fein ist eine elastische Mullbinde zum Fixieren von Kompressen und Salbenverbänden aller Art. Angenehmer Tragekomfort für den Patienten durch sehr weiche, anschmiegsame und luftdurchlässige Gewebestruktur. Gefertigt nach DIN 61634.

Bestellinfos

Länge: ca. 4m gedehnt, 20 Stück je Packung

Art-N°	Breite	PZN
61602	8cm	09945400
61603	10cm	09945392

TRIGOlan

Langzugbinde zur Kompression

Kompressionsbinde zur Anwendung auf intakter Haut



TRIGOlan ist eine dauerelastische, hautfarbene Langzugbinde. Die Binde ist hautfreundlich, atmungsaktiv und waschbar. Die Kompressionswirkung kann indikationsspezifisch durch die Wickeltechnik dosiert werden.

Mit Verbandklammern.

Bestellinfos

Länge: ca. 7m gedehnt, 10 Stück je Packung

Art-N°	Breite	PZN
22006	6cm	09945334
22008	8cm	09945340
22010	10cm	09945311
22012	12cm	09945328

TRIGOband

Kurzzugbinde zur Kompression

Kompressionsbinde zur Anwendung auf intakter Haut



TRIGOband ist eine hautfreundliche, hautfarbene Kurzzugbinde aus 100% Baumwolle. Auch nach längerem Tragen und mehrmaligem Waschen behält die Binde ihre Elastizität bei. Unempfindlich gegen Fette, Salben und Schweiß. Fixierte Bindendenen verhindern das Ausfransen. Mit Verbandklammern.

Bestellinfos

Länge: ca. 5m gedehnt, 10 Stück je Packung

Art-N°	Breite	PZN
21006	6cm	09944889
21008	8cm	09944895
21010	10cm	09944866
21012	12cm	09944872

TRIGOlast

Schlauchbandage mit leichter Kompression

Dauerelastischer Kompressionsschlauchverband zur Anwendung auf intakter Haut



TRIGOlast ist eine dauerelastische Schlauchbandage mit hoher Elastizität und gleichmäßiger Druckwirkung. Der Verband ist schnell und einfach anzulegen und aufgrund des hohen Baumwollanteils gut hautverträglich. Besonders geeignet für komprimierende Fixierverbände, z.B. nach Thorax- oder Abdomenoperationen sowie zum Stützen und Entlasten an Gelenken, Bändern und Sehnen.

Bestellinfos

Länge: ca. 10m ungedehnt, 1 Rolle je Packung

Art-N°	Größe	Breite	Anwendung	PZN
91005	E	8,75cm	Arme, Beine, Knie	09945386
91006	F	10,00cm	Oberschenkel, Knie	09945357
91007	G	12,00cm	gr. Oberschenkel	09945363

TRIGOtubiquick

Dauerelastischer Schlauchverband

Zur Fixierung von Verbänden sowie als Unterzug und Hautschutz bei Gips-, Kunststoff- und Steifverbänden zur Anwendung auf intakter Haut



TRIGOtubiquick ist ein nahtlos gewirkter Schlauchverband mit angenehmen Trageeigenschaften. Der Trikotschlauch lässt sich auf ein Vielfaches seiner Breite dehnen und verengt sich wieder beim Zusammenziehen. Ein farbiger Kennstreifen dient der Größenkennzeichnung.

Bestellinfos

Länge: ca. 10m gedehnt, 1 Rolle je Packung

Art-N°	Größe	Breite	Anwendung	PZN
92003	3	8,0cm	große Gliedmaßen	18001916
92004	4	10,75cm	sehr große Gliedmaßen	18001922

Bestellfax



Bestellungen per Fax: 089 - 7550 5689
oder Email: info@miv-ag.de

Praxis:

Name: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Kundennummer: _____

Lieferanschrift: ☐ wie Praxis

Name: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Bestellnummer: _____

Art-N° oder PZN	Artikel Bezeichnung	Menge der VE

Datum	Stempel (falls vorhanden)	Unterschrift
-------	---------------------------	--------------

Haben Sie Fragen zu den Produkten?
Bitte sprechen Sie uns an!



Management AG für
Integrierte Versorgung
Aidenbachstraße 52a
81379 München

Tel: 089-75075592
Fax: 089-75505689
www.miv-ag.de
info@miv-ag.de

